



<i>Name</i>	<i>Excitation</i>	<i>Dichroic</i>	<i>Emission</i>	<i>LSM Configuration</i>
Fset01	BP 365/12 (DAPI,Hoechst...)	FT 395	LP 397	— — — (取り込み不可)
Fset09	BP 450-490 (Double Stain-FITC,-GFP...)	FT 510	LP 520	FITC(Cy2)
Fset15	BP 546/12 (Rhodamine,Cy3,PI...)	FT 580	LP 590	RHODAMINE(Cy3)
Fset17	BP 474-496 (FITC,GFP,Alexa488...)	505	BP 515-545	FITC(narrow)
Fset23	BP 485/20 BP 546/12 (FITC/Rhodamine double band pass)	FT 500 FT 560	BP 515-530 BP 580-630	

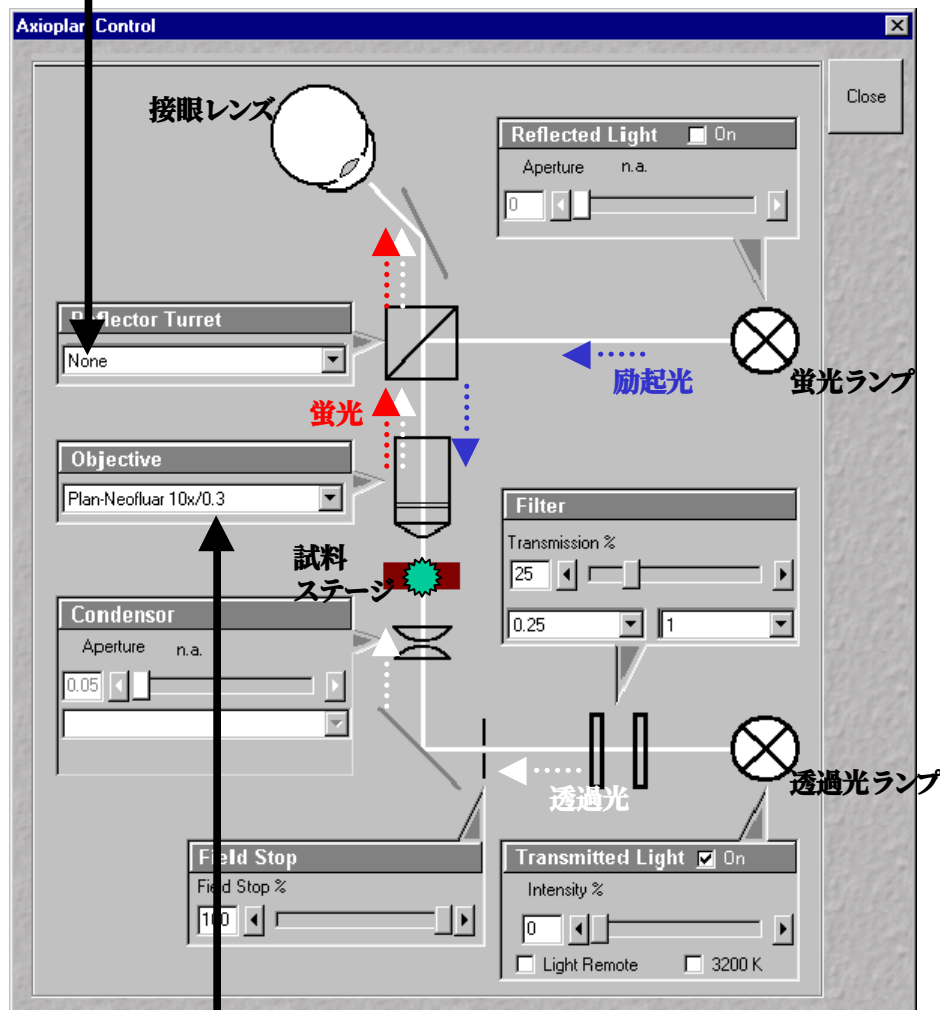

<i>Objective</i>	<i>Magnifier</i>	<i>Condenser</i>
Plan-Neofluar	10x / 0.3	Ⅰ)
Plan-Neofluar	20x / 0.5	Ⅰ)
Plan-Neofluar	40x / 1.3 Oil Iris	Ⅲ)
Plan-Apochromat	63x / 1.4 Oil DIC	Ⅲ)
C-Apochromat	63x / 1.2 W	Ⅲ)
* Plan-Neofluar	100x / 1.3 Oil	Ⅲ)
Plan-Neofluar	40x / 0.75	Ⅰ)
*Achromplan	40x / 0.75 W	Ⅰ)
Plan-Apochromat	20x / 0.8	Ⅰ)

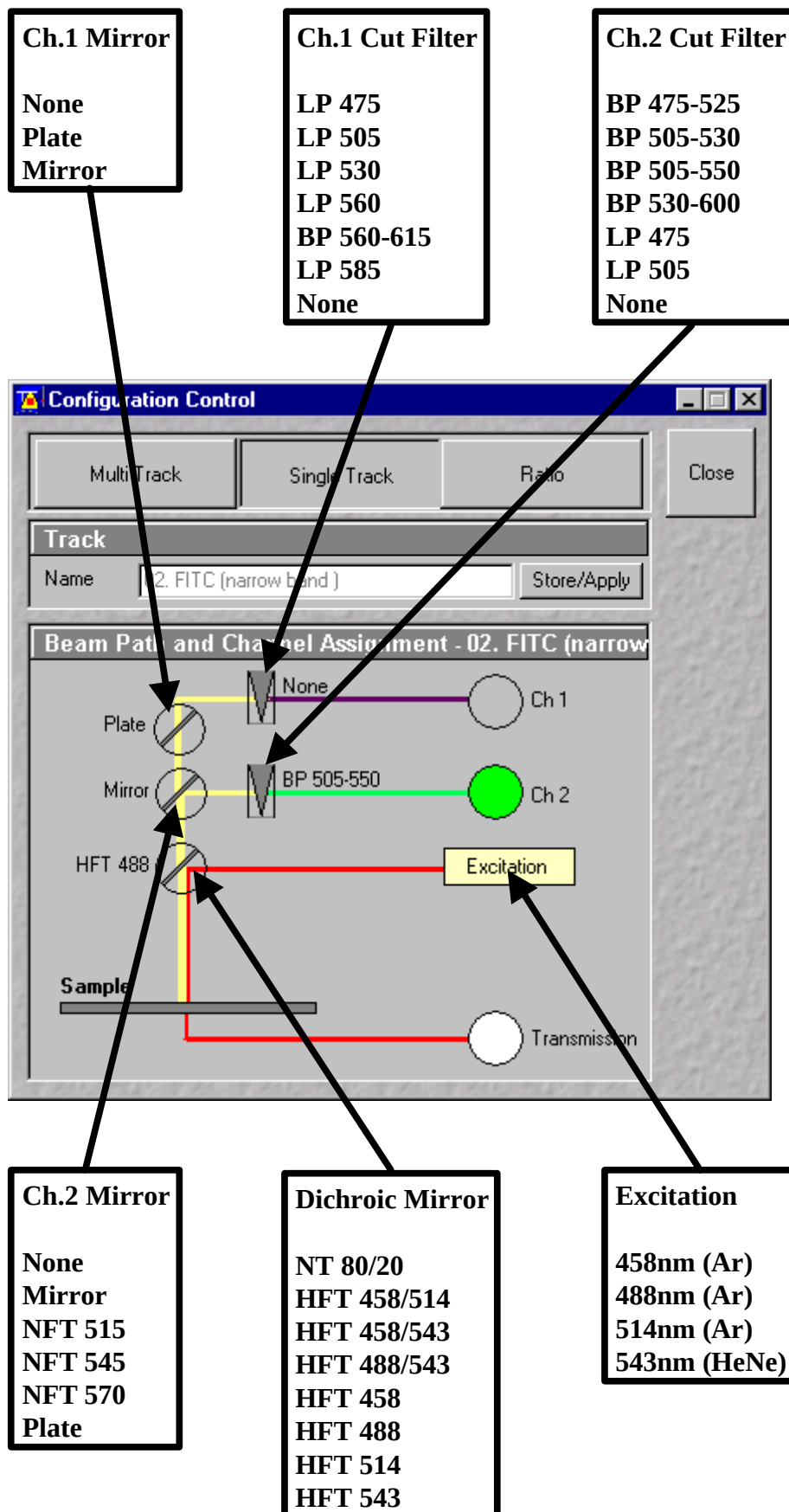

BP ... 数字間の波長の光を透過

LP ... 数字以上の波長の光を透過

Plate ... Ch.2 Mirrorによるずれ補正用

Mirror ... 100%反射 ミラー 斜めに入っているので直角に反射)

NFT ... 数字の波長を境に短い波長を反射、長い波長を透過 (斜めに入っている)

HFT ... 数字の波長を反射、それ以外を透過 (斜めに入っている)